

Hygiene

Citrosteril®

Heißdesinfektionsmittel für Hämodialysegeräte
mit Rezirkulation



**Keine Überprüfung auf
Desinfektionsmittelfreiheit
erforderlich**



**FRESENIUS
MEDICAL CARE**

Citrosteril®

Heißdesinfektionsmittel für Hämodialysegeräte mit Rezirkulation

Desinfektionsmittel für die chemothermische Desinfektion von Hämodialysegeräten¹.

- pH 1,7–2,0
- ausgezeichnetes Kalklösevermögen
- Desinfektion und Entkalkung in einem Arbeitsgang
- Wirkstoffe aus natürlichen Substanzen
- biologisch abbaubar
- geruchlos
- ohne Farb- und Duftstoffe

Wirkung

Die Auswahl und Konzentration der Inhaltsstoffe haben eine synergistische Wirkung auf die desinfizierenden Eigenschaften.

Citrosteril® hat ein breites Wirkungsspektrum und wirkt bei Temperaturen von 84 °C bakterizid sowie viruzid² inkl. HBV/HCV/HIV.

Zeitvorteil

Eine Überprüfung der Gerätehydraulik auf Desinfektionsmittelfreiheit am Ende der Desinfektion ist bei Anwendung von Citrosteril® nicht erforderlich.

Literatur:

1. Solbach W, Universität zu Lübeck: Überprüfung der sporoziden Wirksamkeit, Therapiesystem 5008, 20.12.2002
2. Labor Dr. Merk & Kollegen, Ochsenhausen: Antiviral efficacy of Citrosteril against bovine Parvovirus, 9.9.2005

Weitere Gutachten stehen auf Anfrage zur Verfügung.



Spezifikation

100 g Citrosteril® enthalten:

21 g Citronensäure-1-hydrat, Milchsäure, Äpfelsäure

Bestellinformation

Verkaufs-Einheit


1 × 5 L (Einzelkanister)

2 × 5 L (Karton)

Artikelnummer

F00005857

F00005858

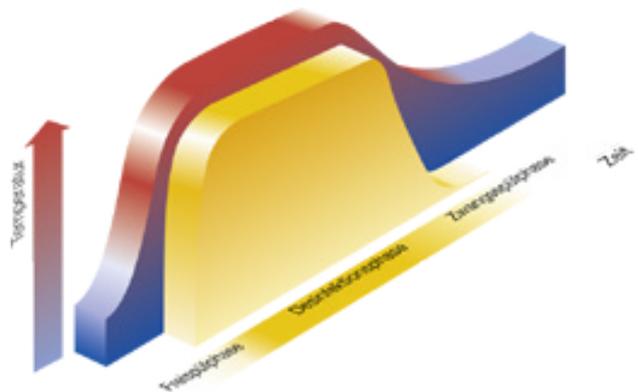

**FRESENIUS
MEDICAL CARE**

Firmensitz: Fresenius Medical Care Deutschland GmbH · 61346 Bad Homburg v. d. H. · Deutschland
Telefon: +49 (0) 6172-609-0 · Fax: +49 (0) 6172-609-2191

Deutschland: Fresenius Medical Care GmbH · Else-Kröner-Straße 1 · 61352 Bad Homburg v. d. H.
Telefon: +49 (0) 6172-609-0 · Fax: +49 (0) 6172-609-8740 · E-mail: marketing.deutschland@fmc-ag.com

Österreich: Fresenius Medical Care Austria GmbH · Lundenburgergasse 5 · 1210 Wien
Telefon: +43 (0) 1-2923501 · Fax: +43 (0) 1-292350185 · E-mail: fmc.austria@fmc-ag.com

Schweiz: Fresenius Medical Care (Schweiz) AG · Aawasserstrasse 2 · 6370 Oberdorf NW
Telefon: +41 (0) 41-6195050 · Fax: +41 (0) 41-6195080 · E-mail: info.ch@fmc-ag.com

www.fmc-deutschland.com · www.fmc-austria.at · www.fresenius.ch